

TAUMEDIKA srl info@taumed.it

Via F. Sacchetti, 7 www.taumed.it 00137 Roma (RM) Tel - Fax +39 0765 481614













Plasma Excellence

Chirurgia non ablativa estetica e dermatologica



Il connubio perfetto tra tecnologia e microchirurgia

Tecnologico, ergonomico, preciso, compatto ed efficace, sono questi gli aggettivi che descrivono HANDY.


Nascosto dietro un vetrino fumè, un display OLED visualizza costantemente il livello di potenza e lo stato di erogazione/pausa del dispositivo.

Un comodo selettore permette la scelta di uno dei sette livelli di potenza, mentre un comodo pulsante abilita all'utilizzo.

HANDY, emettendo un segnale in us cita costante, è calibrato e regolato per non danneggiare il sottocutaneo e le zone circostanti.

Le dimensioni ridotte e il peso contenuto (<100 gr) del corpo del manipolo, rendono HANDY una virtuale estensione della mano del chirurgo.

HANDY è dotato di una batteria ricaricabile tramite stazione wireless; ciò consente la totale assenza di cavi e una maneggevolezza simile a quella di una comune penna per scrivere.

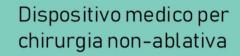

La Dermatologia, la Chirurgia Plastica e la Medicina Estetica possono contare su un nuovo dispositivo medico per chirurgia non-ablativa.

HANDY, sfruttando la ionizzazione dei gas presenti nell'aria, genera un piccolo arco elettrico in grado di vaporizzare i tessuti.

Il meccanismo si aziona quando la punta dell'elettrodo è in prossimità della pelle, senza mai toccarla.

Rispetto alla chirurgia tradizionale. HANDY rende semplici i trattamenti e più veloci i tempi di recupero.



INDICAZIONI

XANTELASMI

ACNE IN FASE ATTIVA
ANGIOMA RUBINO E STELLATO
BLEFAROLIFTING
CHELOIDI
CHERATOSI ACTINICA,
CHERATOSI SEBORROICA
CHERATO ACANTOMA
CICATRICI ACNEICHE
CISTI SEBACEE
CORNO EPIDERMICO
DISCROMIE, LENTIGO
FIBROMI CUTANEI
RESURFACING E MICRO PEELING
RUGHE D'ESPRESSIONE E PERIORBITALI
TILOMI
VERRUCHE SEBORROICHE E VOLGARI

CARATTERISTICHE
POTENZA 1.8W
FREQUENZA DI LAVORO 80KHZ

LIVELLI DI POTENZA CW 5 LIVELLI PULSATI PW 2

BATTERIE RICARICABILI 3,7V 750mAh HANDY 225X32mm HANDY 100gr WIRLESS CHARGER 88X64mm WIRLESS CHARGER 270gr

CONTENUTO

HANDY
WIRLESS CHARGER
ALIMENTATORE USB
CAVO ALIMENTATORE USB
ELETTRODI
MANUALE



